



Massage Master Pro XR1

Gebruikershandleiding

Professioneel massagepistool met verlengde handg

Massage Master Pro XR1 User Manual

Extended Reach Handle Professional Massage Gun



Belangrijke Veiligheidsinstructies

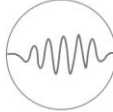
- Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik en bewaar deze op voor toekomstige raadpleging.
- Bij blessures of lichamelijke klachten, raadpleeg eerst een arts voor gebruik.

Important Safety Notice

- Please read this manual carefully before use and store it for future reference.
- In case of injuries or physical complaints, consult a doctor before use.

Content

Productintroductie	3
<i>Product introduction</i>	<i>3</i>
Voor het eerste gebruik	4
<i>Before First Use</i>	<i>4</i>
Type-C oplaadaansluiting	4
<i>Type-C Charging port.....</i>	<i>4</i>
Gebruiksaanwijzing	5
<i>Usage Instructions.....</i>	<i>5</i>
Batterij-indicatie	5
<i>Battery Indicators</i>	<i>5</i>
Automatisch Uitschakelen	5
<i>Auto Shutdown.....</i>	<i>5</i>
Toepassingsgebieden	6
<i>Application area's.....</i>	<i>6</i>
Voorzorgsmaatregelen	7
<i>Precautions</i>	<i>7</i>
Veelgestelde Vragen	7
<i>Troubleshooting Guide.....</i>	<i>7</i>
Problemen & Garantie.....	8
<i>Malfunction & Warranty</i>	<i>8</i>
Onderhoudsinstructies	8
<i>Maintenance & Cleaning.....</i>	<i>8</i>
Technische specificaties.....	8
<i>Technical specifications.....</i>	<i>8</i>

Productintroductie De KHYR Massage Master Pro XR1 (MMP-XR1) is een professioneel massageapparaat met een gebogen verlengde handgreep en meerdere verwisselbare massagekoppen. Dankzij de krachtige motor en een slagdiepte van 10 mm biedt het apparaat een diepe en effectieve massage zonder pijn. De ergonomische vorm maakt zelfmassage van het hele lichaam mogelijk.	Product introduction The KHYR Massage Master Pro XR1 (MMP-XR1) is a professional massage gun with an extended curved handle and multiple interchangeable massage heads. It uses a brushless motor for high-frequency power and a 10mm enhanced amplitude to deliver deep, effective, yet painless massages. The ergonomic design enables self-use, offering a full-body massage experience without assistance.
Geschikt voor: ▪ Sporters en actieve personen ▪ Personen met een zittende levensstijl (zoals kantoormedewerkers of studenten) ▪ Personen met spierpijn of spierspanning ▪ Klachten in nek, schouders, ledematen of slechte doorbloeding	Recommended For: ▪ Athletes and sports enthusiasts ▪ People with sedentary lifestyles (e.g., office workers, students) ▪ Muscle tension or fatigue sufferers ▪ Individuals with neck/shoulder stiffness or nerve discomfort ▪ People experiencing numbness, poor circulation, dizziness, or headaches
Productkenmerken ▪ Borstelloze motor: minder geluid, langere levensduur ▪ 10 mm verbeterde amplitude ▪ Hoge vibratiefrequentie ▪ Ergonomisch ontwerp met lange handgreep ▪ 5 instelbare snelheden (1000–2600 RPM) ▪ Lage trillingen en stil in gebruik ▪ Schokabsorberend handvat ▪ Meerdere massagekoppen inbegrepen	Product features ▪ Brushless massage motor: less noise longer lifecycle ▪ 10mm enhanced amplitude ▪ High-frequency vibration ▪ Ergonomic design with extended handle ▪ 5-level adjustable intensity (1000–2600 RPM) ▪ Low vibration, low noise ▪ Shock-absorbing handle ▪ Multiple professional-grade massage heads
 High frequency  Ergonomic design  Low vibration massage  Multi-level intensity adjustment  Shockless handle  Multiple massage heads	

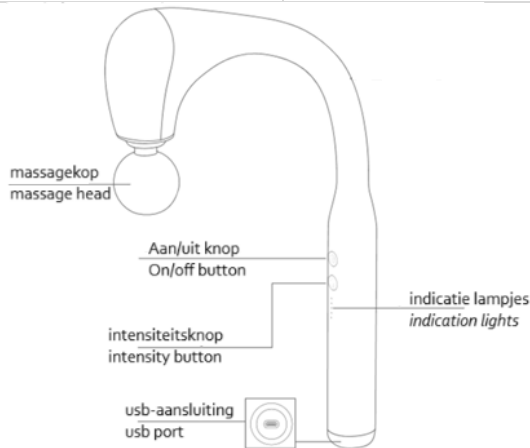
Voor het eerste gebruik

Controleer of het apparaat, de oplaadkabel en accessoires compleet en onbeschadigd zijn. Laad het apparaat volledig op vóór het eerste gebruik. Gebruik het apparaat niet als er schade is. Probeer het niet zelf te demonteren of repareren.

Before First Use

Before use, inspect the device, charging cable, and accessories. Fully charge the device before first use.

Do not use if any part is damaged. Do not attempt to disassemble or repair without proper authorization.



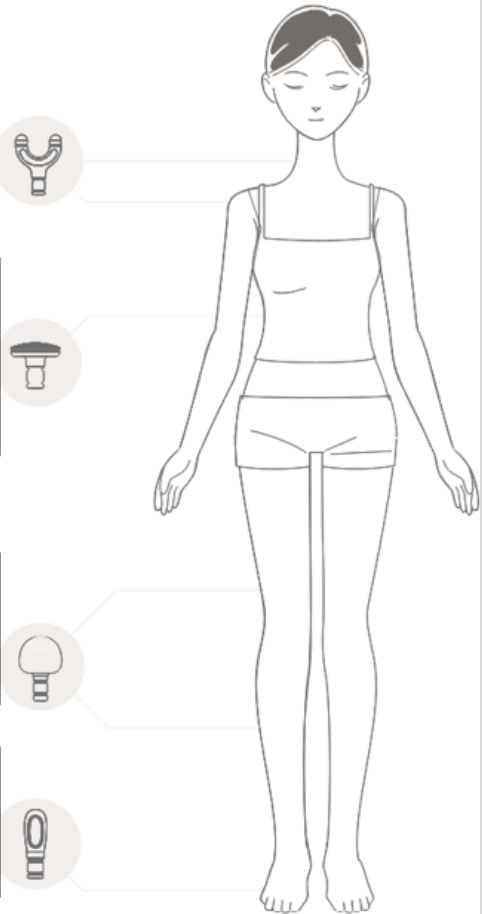
Type-C oplaadaansluiting

- Gebruik de 5V/2A adapter voor laden van de accu.
- Gebruik de meegeleverde oplaadkabel voor opladen.

Type-C Charging port

- Please use the 5V/2A adapter for charging
- Please use the charging cable included for charging

Gebruiksaanwijzing <u>Aan-/Uitzetten</u> ▪ Aan: Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt. Start op Eerste stand. ▪ Uit: Houd de knop opnieuw 2 seconden ingedrukt. <u>Verstellen van de snelheid</u> Druk kort op de knop om tussen standen te wisselen: <i>Eerste → Tweede → Derde → Vierde → Vijfde → terug naar Eerste</i>	Usage Instructions <u>Power On/Off</u> ▪ To turn ON: Hold the power button for 2 seconds. Device starts at First Gear. ▪ To turn OFF: Hold the power button for 2 seconds while device is on. <u>Level Intensity adjustment</u> Short press the gear button to cycle through intensity levels: <i>First → Second → Third → Fourth → Fifth → back to First</i>
Batterij-indicatie ▪ Lage batterij: 5 LED's knipperen 10 seconden snel. Apparaat schakelt daarna uit. ▪ Tijdens opladen: Toetsverlichting knippert langzaam. Let op: Apparaat kan niet gebruikt worden tijdens het opladen. ▪ Volledig opgeladen: Alle lichten blijven continu branden.	Battery Indicators ▪ Low Battery: 5 LEDs flash rapidly for 10 seconds; device shuts down when depleted. ▪ While Charging: Key light gradually flashes. Device cannot be used during charging. ▪ Fully Charged: All key lights stay on steadily.
Automatisch Uitschakelen Apparaat schakelt automatisch uit na 15 minuten gebruik.	Auto Shutdown Shuts off automatically after 15 minutes of continuous use.

Toepassingsgebieden	Application area's
U-vormige massagekop Geschikt voor massage van nek, ruggengraat, hiel en benen U-shaped massage head Suitable for neck, spine, heel, and leg massage Platte massagekop Voor het ontspannen en masseren van grote spieren zoals de <u>latissimus dorsi</u> (rug spier) Flat massage head For relaxing and massaging large muscles such as the <u>latissimus dorsi</u> (back muscle) Sferische massagekop Geschikt voor armen, taille, rug, billen, dijen, kuiten, benen, enz. Spherical massage head Suitable for arms, waist, back, buttocks, thighs, calves, legs, etc. Bullet massage head Suitable for targeting deep tissues such as meridians, palms, soles, etc. Spherical massage head Suitable for arms, waist, back, buttocks, thighs, calves, legs, etc.	

Voorzorgsmaatregelen

- Start met **lage intensiteit** en korte sessies bij eerste gebruik en bouw intensiteit op.
- **Verwijder sieraden** of obstakels vooraf.
- Raadpleeg voor gebruik een arts bij medische klachten of blessures en in de volgende situaties
 - Recentelijke medische ingrepen
 - Huidproblemen, hartklachten of ernstige ziekten
 - Zwangerschap (tenzij goedgekeurd)
 - Gebruik met voorzichtigheid bij ouderen of kinderen.
- **Stop direct** bij ongemak en raadpleeg een arts.
- Niet gebruiken tijdens bewegende activiteiten zoals lopen of autorijden.

Precautions

- Start with low intensity and short sessions when using for the first time, and gradually increase intensity.
- Remove jewelry or obstructions beforehand.
- Consult a doctor before use in case of medical conditions or injuries, and in the following situations:
 - Recent medical procedures
 - Skin conditions, heart problems, or serious illnesses
 - Pregnancy (unless approved)
 - Use with caution in elderly people or children
 - Stop immediately if discomfort occurs and consult a doctor
 - Do not use during motion activities such as walking or driving

Veelgestelde Vragen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat gaat niet aan	Lege batterij	Opladen
	Apparaat is aan het opladen	Gebruik na opladen
Apparaat laadt niet op	Foute verbinding	Controleer en sluit opnieuw aan
Apparaat stopt tijdens gebruik	Automatische uitschakeling	Apparaat opnieuw starten
	Lage batterij	Opladen
	Beveiliging tegen blokkering	Obstructie verwijderen, herstarten

Troubleshooting Guide

Problem	Possible Cause	Solution
Device won't turn on	Battery empty	Charge the device
	Charging in progress	Use after charging
Can't charge the device	Improper connection	Reconnect properly
Device stops suddenly	Timer auto shut-off	Restart after pause
	Low battery	Charge the battery
	Stall protection activated	Remove obstruction, then restart

Problemen & Garantie ▪ Neem contact op met de verkoper bij technische storingen. ▪ Niet zelf demonteren – dit vervalt de garantie. ▪ De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door verkeerd gebruik.	Malfunction & Warranty ▪ Contact your retailer for assistance if the product malfunctions. ▪ Do not disassemble the device. Unauthorized repairs void the warranty. ▪ The manufacturer is not liable for damage caused by misuse or failure to follow instructions.
Onderhoudsinstructies • Schakel apparaat altijd uit en koppel los voor het reinigen. • Neem af met een zachte vochtige doek. • Gebruik geen schurende materialen of agressieve schoonmaakmiddelen. • Bedek de oplaadpoort met de siliconenkap bij het schoonmaken. • Zorg dat de poort droog en schoon is voor het opladen.	Maintenance & Cleaning • Always turn the device off and unplug before cleaning. • Wipe with a soft damp cloth. • Do not use abrasive tools or corrosive cleaners. • Cover the charging port with silicone cap when cleaning. • Ensure port is completely dry before charging again.

Technische specificaties		Technical specifications	
Productnaam	Massage Master Pro XR1	Product Name	Massage Master Pro XR1
Modelnummer	MMP-XR1	Model Number	MMP-XR1
Afmetingen	345,5 × 211 × 59,3 mm	Size	345.5 × 211 × 59.3 mm
Gewicht	~ 490 g	Weight	Approx. 490 g
Batterijcapaciteit	1500 mAh	Battery Capacity	1500 mAh
Werkspanning	7.4 V	Operating Voltage	7.4 V
Nominale spanning	5 V / 2A – 15W	Rated Voltage/Power	5 V / 2A – 15W
Slagdiepte	10 mm	Stroke Depth	10 mm
 Materiaal	ABS, siliconen	Material	ABS, Silicone
Oplaadmethode	Type-C	Charging Type	Type-C
Made in China			

KHYR®, a registred MOTYSS brand

MOTYSS

Laan van Waalhaven 139A
2497 GK Den Haag
www.khyr.eu